



ProFacial

ProFacial™ ist eine All-in-One-Lösung für eine multidimensionale, effektive Gesichtspflege durch die Kombination von vier Technologien, wie Vierfach-Anwendung von Aqua-Peeling, Ionen-Lifting, multipolarer RF und Ultraschall. Diese Technologien können für die Tiefenreinigung, transdermalen Einschleusung, Kollagen-Neubildung und Hautverjüngung effektiv genutzt werden.

ProFacial™ ist eine nicht-invasive, sanfte Gesichtspflege-Lösung, welche die Haut tiefenreinigt und verjüngt.



All-in-One Lösung

Aqua Peeling
Ionto-Lifting
multipolare RF
Ultraschall



Ganzheitliche Gesichtspflege

Detox der Haut durch
gründliche Reinigung,
transdermale Abgabe,
Kollagen-Remodelling
und Gesichtsverjüngung



Benutzerfreundlich

Bequemer Wechsel der Lösungen
und Filter, digitale Lösungs- und
Saugniveauregelung,
automatisches Reinigungssystem,
intuitive Benutzeroberfläche



Kosteneffizient

Durch patentierte
Technologie wird die
Nutzung der Lösung
drastisch gespart, wodurch
die Lösungskosten
gesenkt werden



Aqua Peeling




• Aqua Peeling Verlauf




Schritt 1:

ein starker Luftkompressor beschleunigt die kinetische Energie der mikroskopisch kleinen Lufttröpfchen

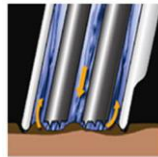

Schritt 2:

durch Luft angetriebenes Wasser schält die äusseren Schichten der abgestorbenen Haut ab

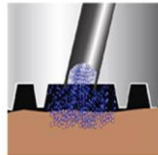

Schritt 3:

starker Vakuumstrom öffnet Mikrokanäle, um die transdermale Zufuhr von Produkten zu erleichtern



Aqua Peeling



• Aqua Peeling Lösungen



PS1 Entfernung abgestorbener Hautzellen

- enthält Milchsäure AHA (Alpha-Hydroxycarbonsäure)
- normale Haut
- Peeling und Entfernung von Verunreinigungen aus dem Inneren der Pore



PS2 intensive Porenpflege und Akne

- enthält Salicylsäure BHA (Beta-Hydroxysäure)
- zu Akne neigender Haut
- Abtragung von Talg
- Komedonenextraktion und Mitesserbehandlung



PS3 intensive Aufnahme von Wirkstoffen und feuchtigkeitsspendend

- enthält hoch angereicherte Essenz mit EGF (Epidermal-Growth-Factor)
- Verbesserung der Hydratation durch Hyaluronsäure, EGF und Nährstoffen



Talg



Akne



Mitesser



Demodex



Aqua Peeling



• Aqua Peeling Merkmal



Kartuschenlösung

- Patentierte Technologie (herausnehmbare Lösung)
- Einfacher Austausch und Aufbewahrung



Digitale Steuerung

- Digitale Durchfluss- und Saugpegelregelung
- Präzise und stabile Kontrolle von Druck und Durchfluss

Mit einem Set (PS1, PS2, PS3) können 50 – 70 Behandlungen (30 bis 50 cm³ pro Verwendung) durchgeführt werden. Verglichen mit anderen Geräten; 12 bis 18 Behandlungen (100 cm³ pro Verwendung)



Aqua Peeling



• Aqua Peeling Merkmal



- Bequeme Trennung und Reinigung des Abflusskastens
- Strukturell dauerhafte Plattform
- Wasserstandsensor



- Automatische Reinigungsfunktion
- Automatische Ausschaltfunktion



- Praktische Benutzeroberfläche
- 7-Zoll-Farb-Touch-LCD
- Geringe Vibration und Lärm



- Abnehmbarer One-Touch Anschluss
- Automatisches Programm-Upgrade über USB




Multipolar RF



• Multipolare RF Prinzip & Anwendung

- Optimale RF Energie, die über 6 Elektroden an die Haut- und Fettschicht abgegeben wird
- Sicher zu bedienen und schmerzfrei

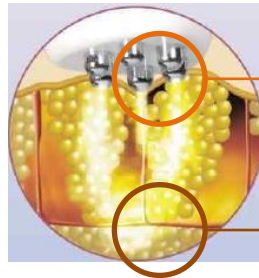

erster Effekt: Kollagen-Remodelling und Verbesserung der Hautelastizität

zweiter Effekt: löst Fett- und Cellulitezellen auf, beschleunigt die Durchblutung und den Lymphfluss



Da RF die Zellen erweitert und aktiviert, wird empfohlen, sie **vor** dem Aqua Peel für ein effektives Peeling und auch in der **allerletzten** Phase der Behandlung zu verwenden, um den Zellmechanismus zu maximieren und die Hautelastizität zu verbessern




Ultrasound



• Ultraschall Prinzip & Anwendung

• Sonoporation

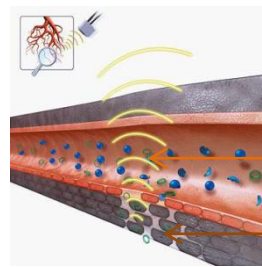

→ Eine stabile Kavitation erzeugt ein akustisches Streaming, das den Flüssigkeitsfluss in der Umgebung einer Zelle erhöht

→ Stabile Kavitation, die Poren in Zellmembranen erzeugt und es ermöglicht, dass ein größeres Volumen an Verbindungen in die Zelle gelangt

- Stimuliert die Fibroblasten und verbessert die Hautelastizität durch Massageeffekt
- Erleichtert den Ausstoss von Melanin und Verunreinigungen aus der Haut
- Aktiviert die Lipolyse durch winzige Vibrationen



Aufgrund des starken Sono-Poration-Effekts wird empfohlen, nach der gründlichen Reinigung mit Aqua Peel die transdermale Verabreichung von **wasserlöslichen** und **fettlöslichen** Kosmetika zu verwenden




Ionto-Lifting



• Ionen-Lifting Prinzip & Anwendung

• Ionto-Poration

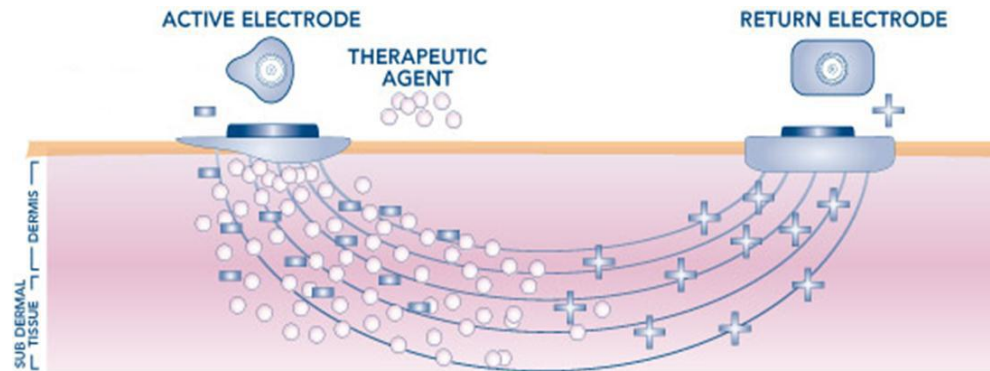

- Die kosmetischen Substanzen durch abstoßende elektromotorische Kraft transdermal antreiben
- Verleiht der Haut Elastizität durch Stimulierung des Hautgewebes und der Muskeln



Empfohlen für die transdermale Verabreichung von **wasserlöslichem** Kosmetikum (wie Vitamin C) auf die Haut

klinische Ergebnisse

Beweis der Wirksamkeit



TRINITY MED CLINICS, TORANCE CALIFORNIA



TRINITY MED CLINICS, TORANCE CALIFORNIA

klinische Ergebnisse

Beweis der Wirksamkeit



Kontaktieren Sie uns!

CDP SWISS AG

Sagistrasse 8B

8910 Affoltern am Albis

043 538 57 45

info@cdpswiss.com

